CORNING

Corning®类器官培养专用 Matrigel®基质

类器官能够模拟体内器官的构成和功能,在疾病模型和药物开发领域的应用越来越广泛。细胞外基质(Extracellular matrix,ECM)是细胞外环境的重要构成,它给细胞提供了具有一定孔隙和刚性的基质环境,提供细胞粘附的机械支持,帮助形成稳定的组织结构,并介导结构中细胞的迁移、定位、极化和信号传导等1-2。

康宁类器官培养专用Matrigel基质是经过优化、并验证可支持类器官生长和分化的细胞外基质。通过以下验证,康宁类器官培养专用Matrigel基质满足了成功培养类器官的一致性和可靠性需求:

- ▶ 经验证可支持类器官培养物的生长和分化,包括:
 - 长期培养小鼠小肠类器官,7代以上仍具有典型的类器官 出芽形态和标记物表达³;
 - 培养原代人气道上皮细胞并分化成极化的3D上皮4。
- ▶每个批次均测量弹性模量。弹性模量指征了用于类器官实验 所需的基质刚度。
- ▶每个批次均被验证可形成稳定的"3D圆顶"结构。"3D圆顶"是 类器官培养中常用的一种方式。
- ▶ 被证明用健康或患病细胞均可成功培养类器官4。

作为一种优化的细胞外基质,康宁类器官培养专用Matrigel基质免除了耗时的筛选和验证过程,实现了类器官研究中必不可少的可重复性和一致性。




应用领域

类器官的生长和分化

类器官带来了器官发生、疾病模型以及患者个性化治疗的进展。将来自正常或患病组织的干细胞或器官祖细胞与康宁 Matrigel基质混合,可用于产生肾脏、甲状腺、肝脏、脑、肺, 肠、前列腺、胰腺、乳房、食道和卵巢的微器官。


由于康宁Matrigel基质与体内环境极为相似,可提供必要的生长 因子、蛋白以及所需的基质结构,已成为类器官应用最广、发 表文章最多的水凝胶。

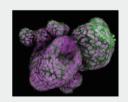


康宁正与拓展Hans Clevers教授工作的类器官前沿机构Hubrecht Organoid Technology(HUB)合作。这项合作结合了HUB在类器官体外模型和模拟器官功能领域的专业知识,以及康宁优化类器官培养工具方面的经验,旨在为研究群体提供更好的类器官应用工具和资源,并进一步推动类器官技术的发展。


注: Hans Clevers教授为荷兰艺术与皇家科学院主席、美国国家科学院院士,是干细胞和类器官领域的大师级领军人物。其实验室首次证明了从Lgr5+干细胞形成胃肠道类器官,具有里程碑的意义。



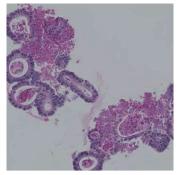

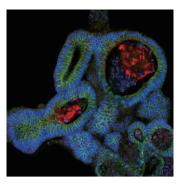

在康宁类器官培养专用Matrigel基质中生长的肠道类器管,表现出典型的出芽形态和标志物表达(波形蛋白、粘 蛋白-2、绒毛蛋白、嗜铬粒蛋白和溶菌酶)3。

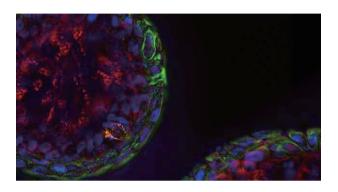

在康宁类器官培养专用Matrigel基质中 生长的气道类器官, 表达基底细胞 (绿色)、纤毛细胞(红色)和杯状 细胞(橙色)的典型分化标志物4。

订购信息

货号	产品描述		个/包	个/箱
356255	康宁类器官培养专用Matrigel基质,不含酚红,	不含LDEV,10mL	1	1

参考文献

- 1. Hartman CD, et al. Extracellular matrix type modulates cell migration on mechanical gradients. Experimental Cell Research, 359(2):361-366, 2017.
- 2. Bryant DM, et al. A molecular switch for the orientation of epithelial cell polarization. Dev Cell. 2014 Oct 27;31(2):171-87.
- 3. Application Note (Corning Lit. Code CLS-AN-542): Culture of mouse intestinal organoids in Corning Matrigel matrix for organoid culture.
- 4. Application Note (Corning Lit. Code CLS-AN-534): High throughput gene expression analysis of 3D airway organoids.

免责声明: 如无特殊说明, 康宁生命科学所有产品仅供科研, 不得用于诊断或医疗。 康宁生命科学对此类产品在临床或诊断上的应用不承担任何责任。













